


Speibeckenventil

Speibeckenventil

zum Einbau in die Absaugleitung
(unterhalb des Speibeckens)

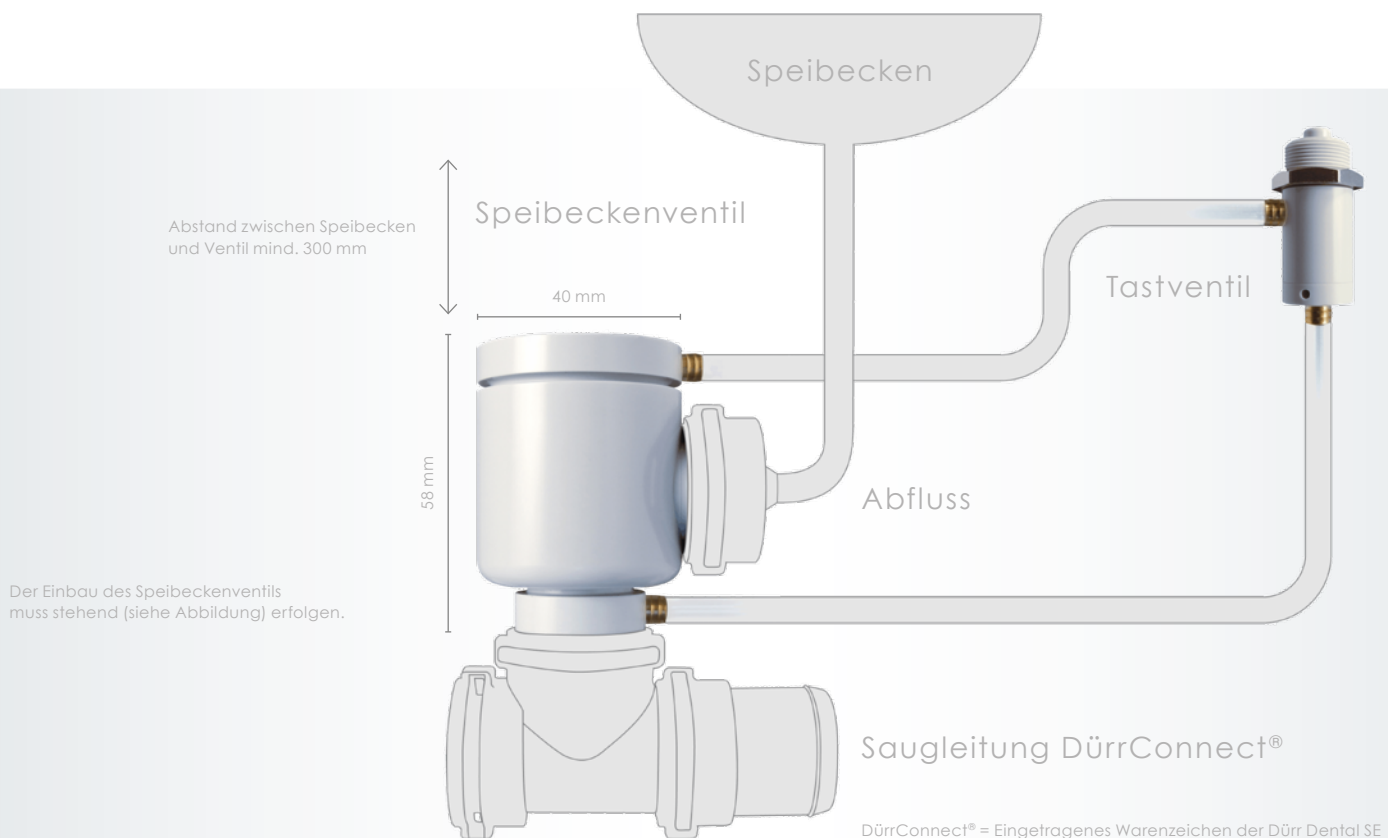

! Bitte beachten

- Der Einbau des Speibeckenventils muss stehend (siehe Abbildung) erfolgen.
- Der Abstand zwischen Speibecken und Ventil muss mindestens 300 mm betragen.
- Die Saugleistung muss zwischen 300 und 350 l/min. betragen.
- Die Absaugmaschine ist einzuschalten; dies erfolgt durch das Herausnehmen des Saugschlauches aus der Schlauchablage.

Alles aus einer Hand!

Mytronic hat eine eigene Entwicklungsabteilung, einen eigenen Werkzeug- und Formenbau und produziert mit einer Fertigungstiefe von über 90%. Dadurch können Produktinnovationen schnell umgesetzt und ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet werden. Mytronic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485.

Mytronic GmbH

Riedelbach | Technologiepark
In den Ensterwiesen 7
61276 Weilrod | Germany

Tel +49 (0) 6083 95989-0
Fax +49 (0) 6083 95989-11
info@mytronic-dental.com